



## Informacje o produkcie

### Zamknięty system do odsysania dla dorosłych 72 H

| Nr. kat | Rozmiar cewnika | Kolor | Długość (mm) | Opis                                                                                                   |
|---------|-----------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73-1071 | 10              | ●     | 540          | Zestaw do rurek intubacyjnych, port MDI, mechaniczna blokada, cewnik z otworami naprzemianległymi.     |
| 73-1271 | 12              | ●     | 540          |                                                                                                        |
| 73-1471 | 14              | ●     | 540          |                                                                                                        |
| 73-1671 | 16              | ●     | 540          |                                                                                                        |
| 73-1871 | 18              | ●     | 540          |                                                                                                        |
| 74-1071 | 10              | ●     | 360          | Zestaw do rurek tracheostomijnych, port MDI, mechaniczna blokada, cewnik z otworami naprzemianległymi. |
| 74-1271 | 12              | ●     | 360          |                                                                                                        |
| 74-1471 | 14              | ●     | 360          |                                                                                                        |
| 74-1671 | 16              | ●     | 360          |                                                                                                        |
| 74-1871 | 18              | ●     | 360          |                                                                                                        |

### Zamknięty system do odsysania pediatriczny 72 H

| Nr. kat | Rozmiar cewnika | Kolor | Długość (mm) | Opis                                                                  |
|---------|-----------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 75-0572 | 5CH             | ●     | 320          | Do rurek intubacyjnych, kominek 45°, kolorowa podziałka centymetrowa. |
| 75-0672 | 6CH             | ●     | 320          |                                                                       |
| 75-0772 | 7CH             | ●     | 320          |                                                                       |
| 75-0872 | 8CH             | ●     | 360          |                                                                       |
| 75-1072 | 10CH            | ●     | 415          |                                                                       |

### Adapter do bronchoskopii

| Nr. kat | Opis                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T20263  | Adapter do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączania układu oddechowego pacjenta. |

## Zamknięty system do odsysania



## Dla bezpieczeństwa Twojego i Twojego pacjenta



SUMI - Ponad 35 lat doświadczenia w produkcji jednorazowego sprzętu medycznego. Nasze wyroby spełniają najwyższe standardy jakości (MDR 2017/745, ISO 13485:2016) i z powodzeniem stosowane są w anesteziologii, intensywnej terapii, na blokach operacyjnych oraz w ratownictwie. Zapewniamy bezpieczne i niezawodne rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnej medycyny.


SUMI, ul.Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek  
tel.+48 22 7833023  
e-mail: [sumi@sumi.com.pl](mailto:sumi@sumi.com.pl) , [www.sumi.com.pl](http://www.sumi.com.pl)



## Zalety stosowania systemów zamkniętych

Główne korzyści płynące ze stosowania zamkniętego systemu do odsysania firmy SUMI to unikanie silnych spadków saturacji tlenowej i nierozprężania płuc, dzięki zapewnieniu nieprzerwanej wentylacji oraz ochrona pacjentów i personelu przed ekspozycją na patogeny z wydzieliny, co prowadzi do minimalizacji zakażeń krzyżowych.

W czasie procedury odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego za pomocą tradycyjnego cewnika do odsysania następuje odłączenie pacjenta od respiratora. W większości przypadków jest to niewskazane ze względu na stan pacjenta. Może nastąpić również rozprzestrzenianie się patogenów na zewnątrz prowadzące do zakażeń zagrażających życiu.

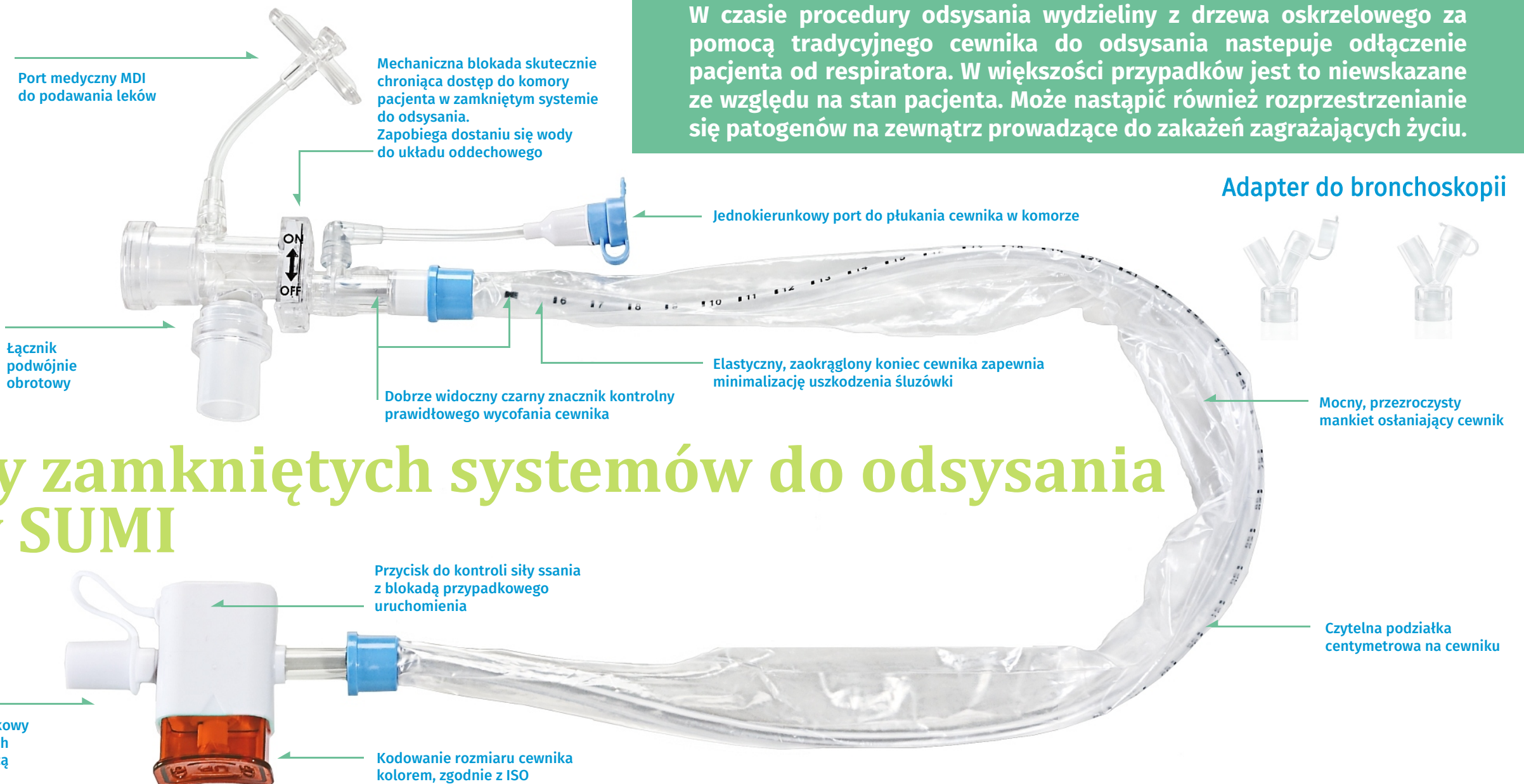

## Zalety zamkniętych systemów do odsysania firmy SUMI

Do każdego zestawu pediatrycznego dołączony jest komplet łączników dopasowanych do odpowiedniego rozmiaru rurki.



W systemie pediatrycznym zastosowano kolorową podziałkę centymetrową.



Każdy zestaw dla dorosłych zawiera klucz do rozłączania, elastyczną przedłużkę i naklejki do oznaczania daty.

